



CPMOTION

PASIVNÍ

POHYBOVÁ TERAPIE



CPMOTION™

Přístroje pro pasivní pohybovou terapii CPM (Continuous Passive Motion) se používají během první fáze rehabilitace po zranění či operaci kloubů dolní končetiny.

Motodlaha CPMOTION opakovaně pohybuje kloubem pacienta v rámci předdefinovaného rozsahu pohybu. Každodenní cvičení tak zvyšuje zpočátku omezený rozsah pohybu daného kloubu.


Pasivní pohybová terapie zajišťuje bezpečné cvičení během fáze hojení a regenerace tkáně, snižuje pooperační bolesti a minimalizuje riziko zánětu.

NEJČASTĚJŠÍ INDIKACE:

- Náhrada kyčelního či kolenního kloubu
- Rekonstrukce křížových vazů
- Artrotomie a artroskopie
- Chirurgické zákroky u zlomenin a pseudoartrózy



UNIKÁTNÍ INOVACE & PRAKTICKÉ VÝHODY

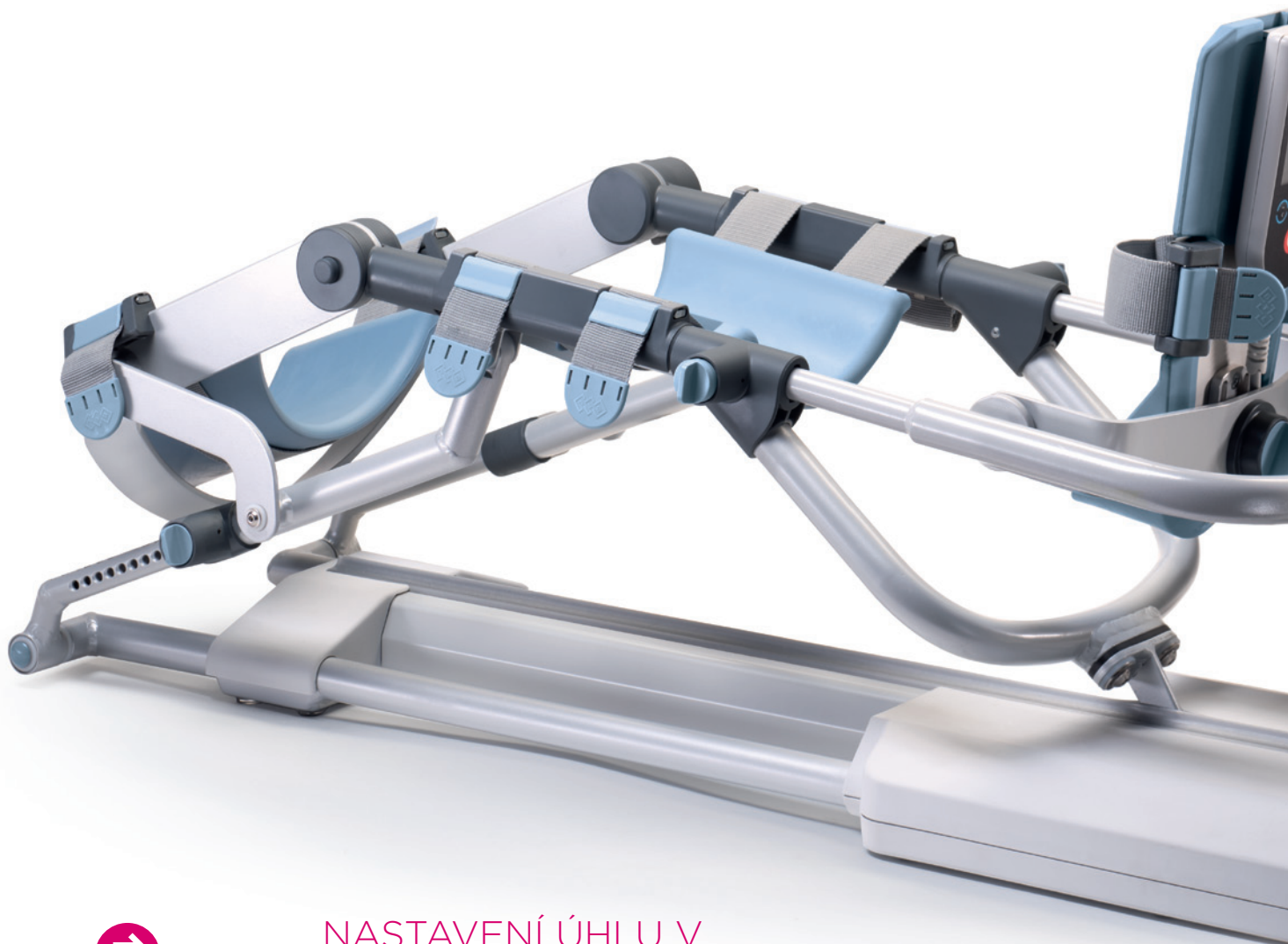


NASTAVENÍ ÚHLU V REÁLNÉM ČASE

- rychlé nastavení úhlu rozsahu pohybu podle aktuálního stavu pacienta



POKROČILÁ NASTAVENÍ TERAPIE

- 13 automatických přednastavených protokolů
- až 50 uživatelských protokolů

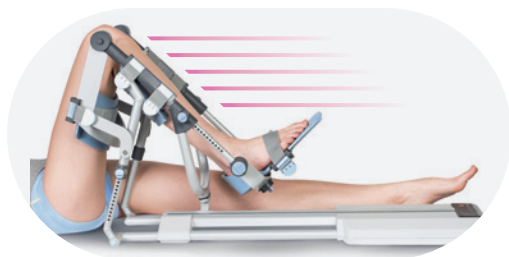

VYSOKÁ RYCHLOST POHYBU

- rychlejší pohyb pro lepší terapeutické výsledky nebo zkrácení času terapie



KOTNÍKOVÝ MODUL

- pro rozšíření terapeutických možností - jeden přístroj pro všechny 3 klouby dolní končetiny



SNADNÉ A RYCHLÉ NASTAVENÍ

- unikátní CLICK SYSTÉM - není nutné manuální dotahování




DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

- velký displej umožňuje zobrazit 5 parametrů najednou



TECHNICKÉ PARAMETRY

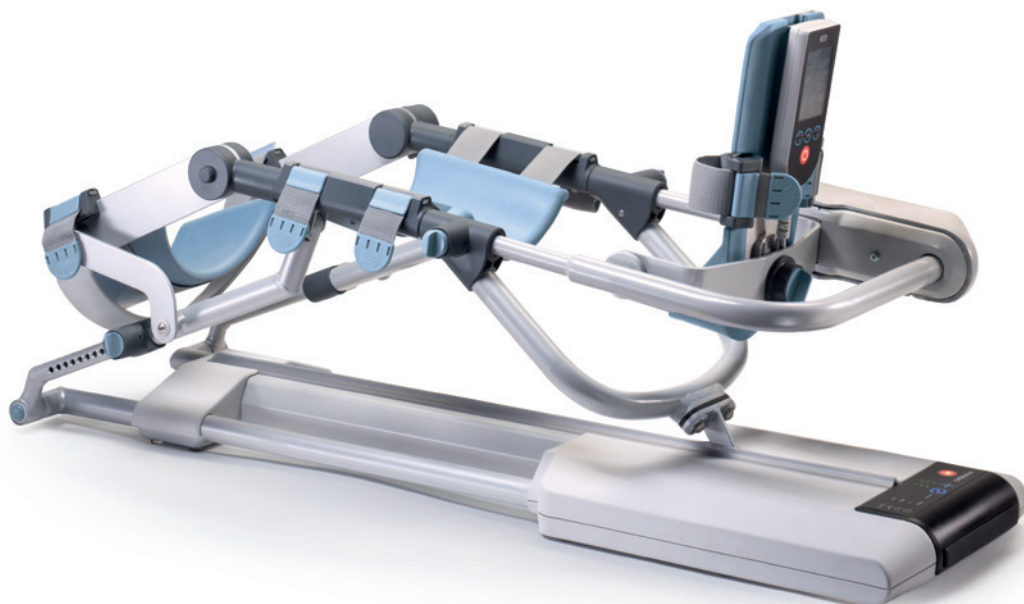

Technické specifikace BTL-CPMotion™

MODEL	BTL-CPMOTION™ K EASY	BTL-CPMOTION™ K PRO	BTL-CPMOTION™ K ELITE
Objednací číslo	P093.001	P093.002	P093.003
Uživatelské rozhraní	START/STOP dálkové ovládání	Dálkové ovládání s dotykovým displejem	Dálkové ovládání s dotykovým displejem
Pokročilá nastavení terapie		●	●
Přednastavené protokoly		●	●
Uživatelské protokoly		●	●
Kotníkový modul		○	●
Extenze/flexe kolena	-10°/123°	-10°/123°	-10°/123°
Extenze/flexe kotníku			25°/40°
Max. rychlost posuvu	380°/min	380°/min	380°/min
Rozměry	390 × 430 × 970 mm	390 × 430 × 970 mm	390 × 430 × 970 mm
Hmotnost	11 kg	12 kg	14 kg
Napětí	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Standardní příslušenství	START/STOP dálkové ovládání	Dálkové ovládání s dotykovým displejem	Kotníkový modul, dálkové ovládání s dotykovým displejem



Volit. příslušenství: stolec, stolec s nastav. výškou

● Standardní | ○ Volitelné



obchod@btl.cz
www.btl.cz

Všechna práva vyhrazena. Přestože byla vynaložena maximální snaha o poskytnutí přesných a aktuálních informací, společnost nenes zodpovědnost za případné chyby obsažené v tomto katalogu. Výrobky a jejich specifikace uvedené v této brožuře mohou doznat změn v závislosti na zemi, ve které se prodávají.

093-77CPMCZ100